



# 毎日、無意識のうちに。

健康管理のストレスから、あなたを守ります。

## クイックスタートガイド


必ず公式サイトWEB取扱説明書内にある  
使用上の注意を読んだ上でご利用ください




WEB取扱説明書はこちらから

保証書は裏面です

## 同梱品

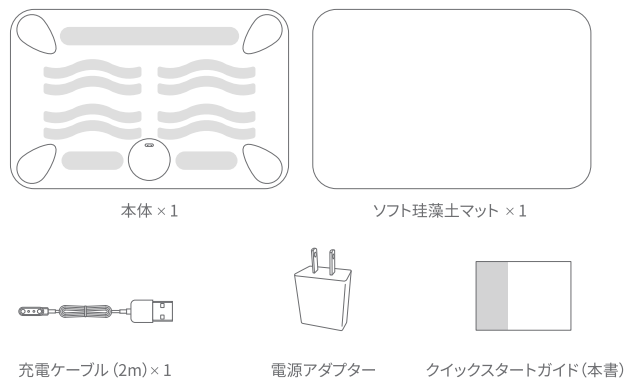

## 本体の説明

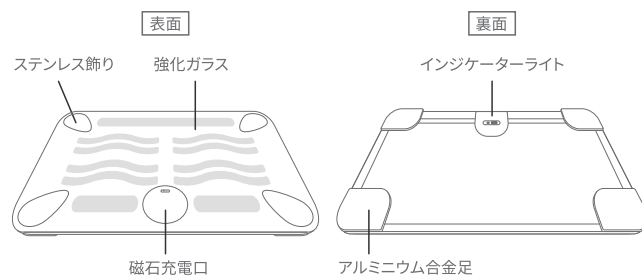

## インジケータライトの説明

|      |           |   |               |
|------|-----------|---|---------------|
| 電源ON | 青色点灯      | ● | Bluetooth接続可能 |
|      | 青色点滅      | ● | Wi-Fi接続中      |
|      | 黄色点滅      | ● | 充電中           |
|      | 緑色点灯      | ● | 充電完了          |
| 電源ON | 緑色点灯(数秒間) | ● | 自動0.00kg校正    |
|      | 赤色点灯(数秒間) | ● | エラー           |

## 本体裏 ボタンの説明

|         |   |        |     |                                                  |
|---------|---|--------|-----|--------------------------------------------------|
| スイッチボタン | 左 | ON/OFF | ON  | ※スイッチボタンは防水カバー付きになっており、完全に右端・左端までスイッチがスライドできません。 |
|         | 右 | ON/OFF | OFF | ※ON方向にスライドさせ「ピッ」と音がなればスイッチがONの状態になります。           |
| リセットボタン |   | RESET  |     | 電源ONの状態、青色のライトが点灯するまで長押しすることでリセットできます。           |


## 本体設置のポイント

- ・水平で硬い床の上に設置してください。
- ・以下に当てはまる場合は、正しく測定できないか、測定できません。
  - 1) 設置した時に本体が斜めになっている
  - 2) 設置した時に本体がガタつく
  - 3) 設置場所にわずかな段差がある
  - 4) 壁やモノと本体が接している
- ・ソフト珪藻土マット裏の両サイドに、滑り止めシールが付いています。本体に吸着するように押さえてください。

## 簡単セットアップ

### 1) 本体を充電する

バッテリーが少ない場合は初期設定ができないため、付属品のアダプターとケーブルを使ってまず充電を行ってください。

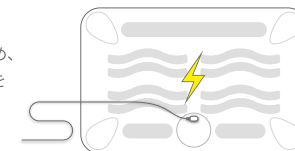

### 2) アプリをダウンロード

スマートフォンで右のQRコードをスキャンするか、App Store / Google Play ストアで「スマートバスマット」で検索してダウンロードしてください。



専用アプリダウンロード

### 3) アプリでログインする

アプリを開いて、メールアドレス / 電話番号で認証コードを取得します。  
認証コードを入力し、[次へ]をタップして、デバイス(本体)との接続操作を進めてください。



### 4) デバイスとの連携(初期設定)

アプリの表示に従って操作を進めていくと、デバイスと連携ができます。  
Wi-Fi接続の際には2.4GHz 帯に接続してください。5GHz 帯のWi-Fiには対応しておりません。

※家族で利用する場合は、代表者1名のみがデバイス接続設定を行ってください。  
接続設定を行なった代表者がアプリで招待メッセージを送ることで、家族が利用できるようになります。



### 5) 最初の測定

最初の測定の画面が表示されたら、「測定をはじめる」から測定を開始して測定してみましょう。  
本体に乗って、「ピッ」という音が鳴るまで動かずにじっとしてください。  
「ピッ」という音がなって、しばらくするとアプリ画面に測定された体重が表示されますので、登録してください。

※お風呂上がりの状況と近い条件にするため、なるべく薄着の状態で測定することをお勧めいたします。  
※測定された体重が大幅にずれる場合は、もう一度測定してください。

## 保証について

保証期間 お買上げの日から1年

### 無料修理規定

1. 正常な使用状態で保証期間内に製品（ハードウェア）が故障した場合には、本書に従い無料で修理をさせていただきます。
2. 保証期間内の故障であっても、次の場合には有料での修理対象となります。  
（1）本書のご提示がない場合。（2）本書にお買上げ日および販売店の記載がない場合または本書の記載を書き換えた場合。（3）保証期間中に発生した故障について、保証期間終了後に修理依頼された場合。（4）使用上の誤り（取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書きに従った正常な使用をしなかった場合を含む）による故障・損傷。（5）他の機器から受けた障害または不当な修理、改造による故障・損傷。（6）お買上げ後の移設、輸送、落下などによる故障・損傷（7）火災、地震、風水害、落雷その他の天災地変、公害、塩害、ガス害（硫化ガスなど）、異常電圧などによる故障・損傷。（8）業務用など一般家庭用以外での使用による故障・損傷。（9）消耗・摩耗した部品の交換、汚損した部分の交換。
3. 故障の状況その他の事情により、修理に代えて製品交換をする場合がありますのでご了承ください。
4. 修理に際して再生部品・代替部品を使用する場合があります。また、修理により交換した部品は弊社が任意に回収のうえ適切に処理・処分させていただきます。
5. 本書に基づく無料修理（製品交換を含む）後の製品については、本保証の残存期間、または交換日もしくは修理日から90日間のいずれか長い期間が保証期間となります。
6. 故障により、お買上げの製品を使用できなかったことによる損害については補償いたしません。
7. 記録媒体を搭載または使用する製品の場合、故障の際または修理・交換により記録内容が消失する場合がありますが、記録内容についての補償はいたしません。
8. 本書は日本国内でのみ有効です。（This warranty is valid only in Japan.）

※本書はお客様の法律上の権利を制限するものではありません。・保証期間後の修理については、公式WEBサイト等をご覧ください。

輸入者：issin 株式会社  
お問い合わせ先：スマートバスマット サポートセンター  
TEL：050-1807-1477  
メールアドレス：support@issin.cc

## 製品仕様

型番：SBM22U01LJ

計量範囲：6～150 kg

最小表示：6～75 kg ±100 g

75～150 kg ±200 g

電池：リチウムイオン蓄電池（内蔵）

DC4.2V

通信方式：2.4G 802.11 b/g/n

防水規格：IP65

使用環境温湿度：0～40℃ ～90% RH

寸法：600 x 390 x 20mm

質量：5.6 kg

※BMIは計算値です。

※外形と質量は個体差が多少ございます。

よくある質問

